
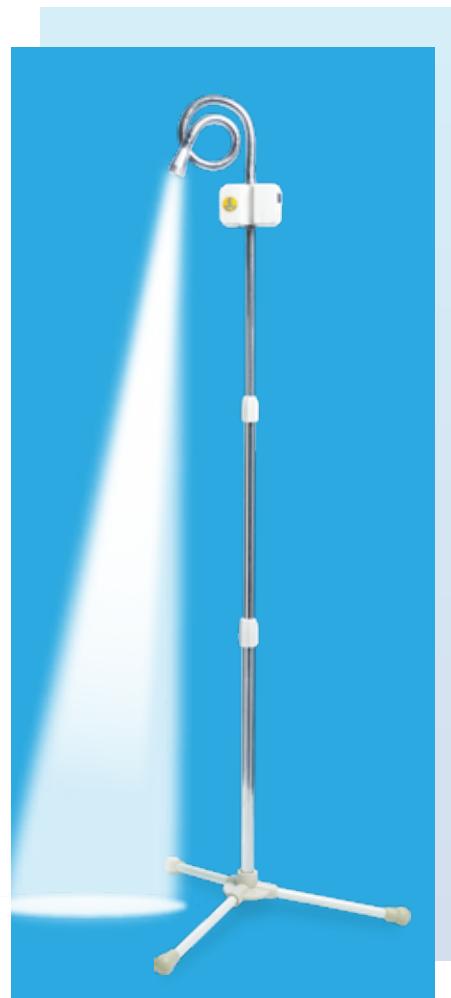


ĐÈN Y KHOA MEDICAL LAMP

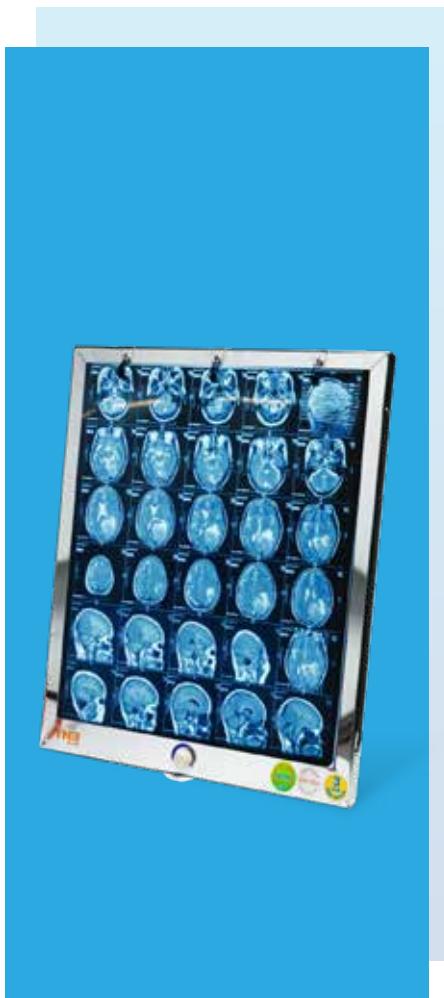

DANH MỤC SẢN PHẨM

CATALOGUE 2024


Về chúng tôi

Tên công ty	Công ty sản xuất thương mại dịch vụ Thành Nhân TNE
Nhà máy	289T9 Cây Da Xê, KP Tây B, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, TP.Bình Dương
Phòng trưng bày	268 Quốc Lộ 1K, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương
Trụ sở	36/12, Đường 13, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại	028 2215 8281 / 028 5443 1218 / 028 5443 1217
Đường dây nóng	Miền Nam 098.919.3456 Miền Trung 098.939.6164 Miền Bắc 098.939.6162
VPĐD tại Hà Nội	108 ngõ 7, Nguyễn Ngọc Doãn, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, Hà Nội
Website	www.denykhoa.com - www.tnelamp.com - www.thanhnhantne.com
Người đại diện pháp luật	Trần Quang Minh - Chủ tịch

Thành Nhân TNE chuyên sản xuất, phân phối, dịch vụ các loại đèn y tế. Sở hữu hai thương hiệu nổi tiếng là TNE và MEDILAMP với nhiều sản phẩm phổ biến trên thị trường.

Các sản phẩm chính bao gồm: Đèn Hồng Ngoại, Đèn Đọc Phim Y Khoa, Đèn Gù Đa Dụng Y Tế, Đèn Gù Tiểu Phẫu Led, Đèn Gù Tiểu Phẫu Ánh Sáng Lạnh, Đèn Gù Tiểu Phẫu MEDILED, Đèn Cực Tím, Đèn Ánh Sáng Xanh, Đèn Thủ Thị Lực... Mỗi loại có nhiều model, tính năng tiện ích khác nhau. Ngoài ra, TNE luôn sẵn sàng đáp ứng các đơn đặt hàng riêng.

Được thành lập từ năm 1994, với bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm, luôn tiên phong đầu tư khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ. Nhà máy của Thành Nhân TNE có thiết bị từ các nước G7. Nguyên vật liệu đầu vào của nhà máy được kiểm soát nghiêm ngặt, cung cấp bởi các hãng nổi tiếng. Do đó, sản phẩm luôn bảo đảm chất lượng, an toàn, tinh xảo, bền bỉ, tính năng và thiết kế hiện đại, đồng thời đáp ứng được các đơn hàng số lượng lớn.

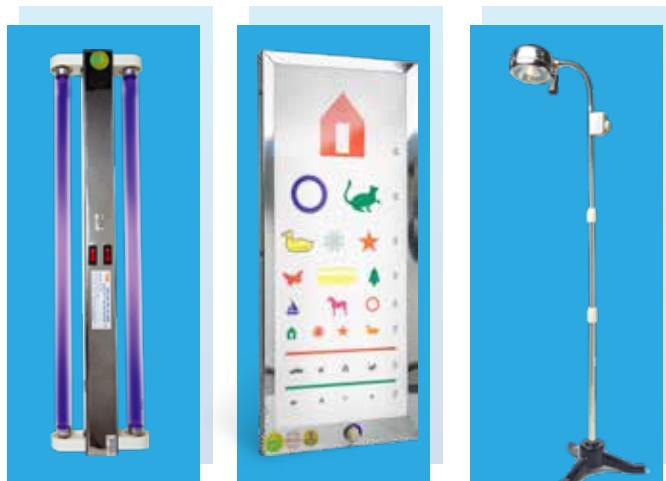

Tại Việt Nam, sản phẩm của Thành Nhân TNE luôn được ưu tiên chọn số 1 trong các gói thầu và có mặt ở hầu hết các cơ sở y tế, bệnh viện lớn nhỏ: bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện 108, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện Columbia, bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ.v.v..

Dễ dàng mua được với giá phải chăng tại các cửa hàng Dụng Cụ Thiết Bị Y Tế và một số Nhà Thuốc, cửa hàng Điện Máy tại trung tâm các tỉnh thành, quận huyện trên cả nước. Ngoài ra còn được bày bán ở Lào, Campuchia, Myanmar, Hà Lan, Anh Quốc, Pháp...

Với lợi thế chủ động hoàn toàn linh phụ kiện thay thế, do đó việc bảo hành, hậu mãi thuận lợi.

Tính chất pháp lý bao gồm: Bản quyền sở hữu trí tuệ, chứng nhận chất lượng, đăng ký lưu hành, giấy phép xuất khẩu toàn cầu (CFS), chứng nhận bảo vệ môi trường, ISO 13485, ISO 9001, các giải thưởng trong và ngoài nước ...

 Liên hệ và giao hàng bao gồm: Số điện thoại, Zalo thường trực ; số điện thoại các đường dây nóng ; Email, Facebook, Lazada, Tiki, Sendo... và phương tiện giao hàng rộng khắp.

**THÀNH LẬP
1994**

**SẢN PHẨM
ĐA DẠNG**

RỘNG KHẮP

**GIẤY PHÉP
LƯU HÀNH**

GIÁ RẺ
(Bằng 1/5 so với G7)

CÙNG VỚI KHÁCH HÀNG ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN VÀ SỰ TÍN NHIỆM



Sứ Mệnh

Mang lại các sản phẩm Đèn Y Tế đáp ứng sự mong đợi của người dùng.

Tầm Nhìn

Luôn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp các loại Đèn Y Tế bằng tiên phong công nghệ, giá cả và độ phủ rộng thị trường. Sản phẩm có chỗ đứng tại nhiều quốc gia.

Giá Trị Cốt Lõi

Chất Lượng - An Toàn - Tiêu Chuẩn - Không Ngừng Phát Triển - Xã Hội



CÁC SẢN PHẨM CỦA THÀNH NHÂN TNE

**CÁC SẢN PHẨM CÓ NHIỀU KÍCH CỠ, MÀU SẮC VÀ CHI TIẾT KHÁC.
CÁC CHI TIẾT CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC NẾU KHÔNG LÀM
THAY ĐỔI CÔNG NĂNG CỦA SẢN PHẨM.**

ĐÈN HỒNG NGOẠI

Đèn hồng ngoại sản xuất và phân phối bởi TNE

Đèn hồng ngoại được sử dụng phổ biến trong chữa bệnh, vật lý trị liệu, chăm sóc sức khoẻ hằng ngày và làm đẹp.

CÔNG DỤNG CỦA ĐÈN HỒNG NGOẠI:

Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng điện từ hồng ngoại chiếu rọi vào cơ thể người gây ra các phản ứng lý, hoá nhằm điều trị các bệnh lý: phù nề, bầm tím, giảm đau nhức, mỏi, thấp khớp, sưởi ấm, sản khoa, làm mềm da, v.v

Tia hồng ngoại là bức xạ ánh sáng không nhìn thấy có bước sóng trong khoảng 760nm. Nguyên lý hoạt động của đèn là sử dụng phương pháp nhiệt đơn sắc dùng để kích thích chuyển hóa và tăng cường sự trao đổi chất cũng như chống lại một số nấm và vi khuẩn có hại cho da và protein của cơ thể người. Tăng cường lưu thông máu, chống lại sự tắc nghẽn một số mạch máu gây đau nhức cho cơ thể. Có tác dụng giảm đau tức thì, chống co cứng cơ; làm giãn mạch, tăng chuyển hóa và dinh dưỡng tại chỗ. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có công dụng: Làm đẹp da: làm mềm da, những mạch máu li ti được lưu thông tốt, kích thích sinh trưởng tế bào da mới, mất đi tế bào da chết.v.v..

Sử dụng xông ấm cho mẹ và bé thời kì hậu sản. Sử dụng thư giãn hằng ngày thông thường và có tác động tức thì.



Thông số kỹ thuật

Đèn hồng ngoại 45 cm

Công suất 250W

Dây nguồn 2m

Điện thế

Tùy thuộc vào bóng đèn.

Trực tiếp nguồn điện 220V
tại Việt Nam.



- Chân được thiết kế cao 45 cm phù hợp với mọi tư thế điều trị.
- Cỗ ngỗng linh động góc xoay đến gần 360 độ.
- Đầu đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn
- Độ bền cao

Đèn hồng ngoại 1m7

Công suất 250W , tăng giảm được.

Dây nguồn 3m

Điện thế

Tùy thuộc vào bóng đèn.

Có chức năng Dimmer (tăng giảm độ nóng, ứng dụng chiếu sâu hoặc rộng) sẽ tăng hiệu quả điều trị.

- Điều chỉnh chiều cao từ 1m - 1,7m
- Cỗ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm
- Đầu đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn
- Độ bền cao



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SỬ DỤNG HỢP LÝ:

- ✓ Đèn hồng ngoại TNE và MEDILAMP được thiết kế cổ ngỗng để linh hoạt mọi góc độ chiếu rọi vào cơ thể, hướng bức xạ hồng ngoại dễ dàng vào vùng cơ thể cần chiếu rọi.
- ✓ Chiếu đèn 15-30 phút. Mỗi ngày rọi từ 2-4 lần.
- ✓ Khoảng cách từ đèn đến người từ 30 cm - 80 cm, tránh tiếp xúc quá gần đến dễ gây bỏng .
- ✓ Cần che bằng khăn ướt ở những vùng cơ thể nhạy cảm không cần hay không nên chiếu rọi.
- ✓ Các Bác sĩ khuyên dùng đèn hồng ngoại hằng ngày. Bạn nên theo hướng dẫn sử dụng đèn của bác sĩ
- ✓ Đèn có chức năng DIMMER (tăng giảm độ nóng, ứng dụng chiếu sâu hoặc rộng) sẽ tăng hiệu quả điều trị.



Vật liệu tinh túy



Vật liệu tiêu chuẩn của Thành Nhân TNE

CHÚNG TÔI KHUYẾN CÁO KHÔNG SỬ DỤNG ĐÈN HỒNG NGOẠI CHO CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:

- Không sử dụng cho người quá nhạy cảm với nhiệt. Những người thay đổi ở da gây ra bởi bệnh tật
- Không sử dụng sản phẩm trong trường hợp uống rượu.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

- Em bé sơ sinh cần được sử dụng đèn cẩn trọng về khoảng cách (30cm-80cm), độ nóng của đèn thích hợp, ít hơn người lớn.
- Trẻ em và người lớn tuổi cần được giám sát khi sử dụng đèn. Trẻ em thường không biết rõ cách sử dụng thiết bị điện an toàn.
- Cần có người giám sát khi sử dụng cho người bị hạn chế về tinh thần. Không tiếp xúc vào thủy tinh bóng đèn khi đang bật, có thể gây bỏng hoặc cháy.
- Không để bất cứ vật dụng nào chạm vào đèn khi đang bật. Không rọi vào các vật dễ cháy, để phòng quá nhiệt gây ra cháy. Chỉ bao che hoặc đóng gói khi đèn đã nguội.
- Trong một số trường hợp, các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có thể dẫn đến các phản ứng da quá nhạy cảm hoặc dị ứng. Nên ngưng thuốc hay mỹ phẩm ngay trong trường hợp này.
- Không sử dụng lúc buồn ngủ, đang ngủ.
- Khi chiếu rọi vào mặt, cần nhắm mắt hoặc che mắt lại.
- Không để đèn tiếp xúc với nước.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH, THAY BÓNG:




Sản phẩm phổ biến trong nhiều bệnh viện lớn nhỏ, trong gia đình, các cơ sở mát xa, làm đẹp, cá nhân hoá, trong sinh học và công nghiệp.




ĐÈN ĐỌC PHIM Y KHOA

Tính năng nổi bật của sản phẩm

So với các sản phẩm hiện có trên thị trường, sản phẩm Đèn đọc phim của Thành Nhân TNE có nhiều cải tiến nổi bật:

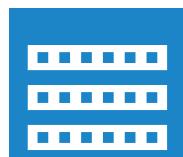

Chip LED Hàn Quốc, ánh sáng trắng được sử dụng thay thế cho đèn neon cũ.

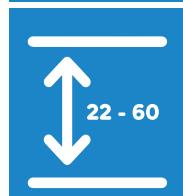

Độ dày từ 2,2cm - 6cm. Rất thuận tiện cho việc lắp đặt treo tường (Phụ kiện kèm theo) hoặc để bàn hay trên giá đầy (sản xuất riêng). Tiết kiệm, làm đẹp không gian.



Ánh sáng đồng đều, không mỏi mắt, có Dimmer điều chỉnh độ sáng phù hợp với người sử dụng. Tự động bật sáng khi cài phim (theo đặt hàng)



Tiết kiệm điện, chi phí điện năng chỉ bằng 1/3 công suất so với bóng đèn huỳnh quang.



Sử dụng biến tần làm giảm sự mỏi mắt bằng cách loại bỏ nhấp nháy, tạo ánh sáng liên tục, dễ dàng nhìn thấy



Đèn có tuổi thọ hơn 30.000 giờ. Độ bền gấp 10 lần các loại đèn thông thường



Đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường.



Tại Việt Nam, điện nguồn của đèn là 220v/50Hz.

Đèn đọc phim y khoa sản xuất và phân phối bởi TNE




Sản phẩm Đèn đọc phim do Thành Nhân TNE sản xuất để sử dụng với phim MRI, CT và X-quang, hỗ trợ bác sĩ hiệu quả trong việc đưa ra những chẩn đoán chính xác.

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Các thông số đèn đọc phim được sản xuất thường xuyên
theo chuẩn toàn cầu:

	1 film	2 film	3 film	4 film
Bề mặt	45cm x 36cm	45cm x 72cm	45cm x 108cm	45cm x 144cm
Kích thước bao	45,2x12,5x51cm	82x12,5x51cm	112,5x12,5x51cm	150x12,5x51cm
Nguồn điện / Công suất	AC 220V / 48W	AC 220V / 96W	AC 220V / 144W	AC 220V / 192W


Đèn đọc 1 film

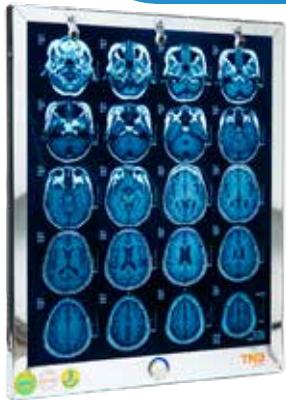

Đèn đọc 2 film



Đèn đọc 3 film

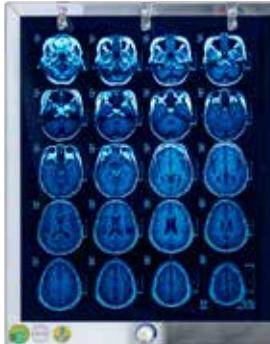

Đèn đọc 4 film



- * TRÊN GIÁ ĐẨY, GIÁ ĐỂ BÀN HOẶC TREO TƯỜNG
- * CÁC ĐÈN ĐỌC PHIM CÓ NHIỀU KÍCH THƯỚC VÀ CHI TIẾT KHÁC

ĐÈN CỰC TÍM**UVC - Tiệt trùng bề mặt**

Các đèn cực tím UVC này có cấu tạo gần giống đèn huỳnh quang nhưng phát ra tia cực tím C, có bước sóng 200 - 280 nm. Có hiệu quả tiệt trùng bề mặt cao nhất và thời gian nhanh nhất.

Tia UVC làm biến dạng hoặc giết chết vi khuẩn bằng cách phá vỡ chuỗi DNA của chúng khi tiếp xúc.

Do đó, chúng ta cần lau chùi bề mặt cần tiệt trùng trước khi chiếu đèn.

Ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong nhiều không gian. Tuân thủ nguyên tắc an toàn.

**HƯỚNG DẪN****01.**

Trước hết, làm sạch bề mặt cần diệt khuẩn.

02.

1w công suất đèn sẽ tương ứng với 1(m³) khối tích phòng, với thời gian chiếu đèn là 10 phút. Nếu công suất đèn cực tím lớn hơn thì thời gian ít hơn theo tỉ lệ.

03.

Các vật dụng cần chiếu rọi lâu hơn, kỹ hơn.

04.

Hướng tia cực tím vào vùng cần chiếu rọi. Nếu phòng có nhiều ô hoặc khe thì cần chiếu rọi riêng từng khu vực ô hoặc khe. (Mỗi khu vực trong phòng cần rọi 10 phút, chiếu rọi hết trong phòng).

05.

Người cần phải tránh xa khi chiếu rọi đèn, không để tia cực tím chiếu rọi vào người. Cần sử dụng sản phẩm đúng cách và cẩn trọng.

06.

Sử dụng sản phẩm trong các trường hợp cụ thể, nên theo sự chỉ dẫn của y bác sĩ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đèn một bóng có cấu tạo hình C




Chiều dài	45cm	60cm	90cm	120cm
Công suất	#≈10W	#≈18W	#≈28W	#≈36W

Đèn hai bóng



Chiều dài	45cm	60cm	90cm	120cm
Công suất	#≈20W	#≈36W	#≈56W	#≈72W

Điện thế: 220V tại Việt Nam
Bước sóng < 300nm/ tia UVC không xuyên qua kính

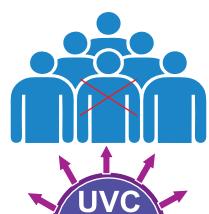

ĐÈN CHIẾU VÀNG DA SƠ SINH

Đèn hoạt động trên nguyên lý tác động của năng lượng ánh sáng xuyên qua da, trực tiếp tác động lên phân tử Bilirubin có ở lớp mô mỡ dưới da. Nguồn năng lượng ánh sáng được phát ra từ đèn chiếu có khả năng biến phân tử Bilirubin thành các phân tử Photobilirubin có khả năng hòa tan trong nước được đào thải qua nước tiểu. Khi nồng độ Bilirubin được giảm xuống ngưỡng an toàn thì hiện tượng vàng da ở trẻ sơ sinh cũng được cải thiện và điều trị thành công.

Thông số kỹ thuật

Điện thế	220 VAC
Bước sóng	400 - 500 nm
Màu	ánh sáng xanh dương
Kích thước đèn	Chiều dài 64cm x Chiều ngang 50cm
Kiểu dáng đèn	Hình chữ U
Chiều dài bóng đèn	60 cm
Kiểu bóng	Tuýp
Số lượng bóng đèn	5
Công suất	100W
Chiều cao	tùy chỉnh đến 1,4m

Cảnh báo khi sử dụng bóng đèn vàng da

Không chiếu trực tiếp vào mắt và bộ phận sinh dục của trẻ, phải che khăn cẩn thận.

Hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh.



ĐÈN THỬ THỊ LỰC

Sản phẩm Đèn thử thị lực do Thành Nhân TNE sản xuất giúp kiểm tra thị lực, tập luyện, điều trị mắt.

Đèn thử thị lực là hệ thống các ký hiệu, hình ảnh có những nguyên tắc riêng để đánh giá mắt, thông qua: thị lực, cận thị, viễn thị, lác mắt, màu sắc...

Bảng chữ cái C dành cho người không biết chữ. Bảng chữ ZU để sử dụng khám mắt cho người lớn và trẻ em. Bảng hình màu để khám cho trẻ em và thử màu cho người lớn. Các ký tự trong bảng này thường được sắp xếp lớn đến nhỏ dần, đến một ngưỡng cho phép mắt hoàn toàn bình thường có thể đọc được ở mức nhỏ nhất.

Tính năng nổi bật của sản phẩm



Sử dụng Công nghệ đèn biến tần không gây mỏi mắt.



Độ sáng đều, ánh sáng chuẩn, dimmer điều chỉnh ánh sáng phù hợp với người sử dụng



Tiết kiệm điện hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường



Đèn được thiết kế nhỏ gọn, mỏng 60mm.



Tại Việt Nam, điện nguồn của đèn là 220v/50Hz.



Đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường.

Thông số kỹ thuật

Kích thước/Công suất:

Kích thước bao bì

Công suất

Dạng

Hình chữ C	11,5 x 30 x 80,5 cm	/ 40W	LED
Hình chữ cái UZ, ZU	11,5 x 27 x 64 cm	/ 30W	LED
Hình màu	11,5 x 27 x 64 cm	/ 30W	LED

Nguồn: 220V; 0,2A

Kèm phụ kiện treo tường

Dây nguồn: 2m

Vỏ đèn bằng inox

Khoảng cách đọc: TNE hiện cung cấp bảng có khoảng cách 5m và 2,5m

Hiện TNE có 4 loại đèn thử thị lực phục vụ nhu cầu của khách hàng

Đèn thử thị lực ZU

Thích hợp kiểm tra người biết chữ



Đèn thử thị lực chữ C

Thích hợp kiểm tra người chưa biết chữ



Đèn thử thị lực màu

Thích hợp kiểm tra trẻ em chưa biết chữ và kiểm tra mù màu người lớn



Đèn thử thị lực chữ ngược UZ

Sử dụng kèm với tấm gương phản chiếu cách đèn 2,5m và đọc trên gương ở khoảng cách 2,5m



ĐÈN GÙ ĐA DỤNG

Dùng để khám bệnh và chiếu tia hồng ngoại.



Thông số kĩ thuật

Công suất 10 - 250W

Điện thế Tùy thuộc vào bóng đèn

Dây nguồn 3m

Chiều cao từ 1m - 1.7m

Độ bền cao

Chóa đèn Ø16cm

Dimmer (tăng giảm độ sáng) hoặc công tắc

Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ

Chuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn

Tự giải nhiệt (sử dụng 24/24)

Đế tháo ráp (tiện dụng mang đi) và đế gang

ĐÈN GÙ II

Đèn gù II TNE với nhiều ưu thế nổi trội là sản phẩm nhỏ gọn đẹp, được các bác sĩ ưa chuộng trong khi khám bệnh và xông ấm.

Với đặc điểm không thoát nhiệt dùng để xông ấm cho hiệu quả sử dụng cao hơn. Có thoát nhiệt dùng để khám bệnh.

Điều chỉnh chiều cao chân đèn, bật tắt dễ dàng hoặc có Dimmer điều chỉnh nhiệt độ và độ sáng thích hợp, sử dụng thuận tiện. Dễ dàng tháo ráp mang đi.

**Thông số kỹ thuật**

Công suất | 10 - 250W

Điện thế | Tùy thuộc vào bóng đèn

Dây nguồn | 3m

Chiều cao | từ 1m - 1.7m

Độ bền cao

Chóa đèn | Ø11cm

Dimmer (tăng giảm độ sáng) hoặc công tắc

Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ

Chuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn

Tự giải nhiệt (sử dụng 24/24)


Đế tháo ráp (tiện dụng mang đi) và đế gang

ĐÈN GÙ LED

Ánh sáng không nhiệt

Đèn gù tiểu phẫu LED là thiết bị chiếu sáng chuyên dụng được ứng dụng trong tiểu phẫu, khám bệnh, thẩm mỹ, làm đẹp.

Sản phẩm với thiết kế độc đáo, hiện đại và siêu bền với ánh sáng trắng, không nhiệt tại vị trí chiếu rọi. Đèn có thể điều chỉnh độ cao 1m – 1,7m và xoay 360 độ dễ dàng. Dễ dàng tháo ráp mang đi.

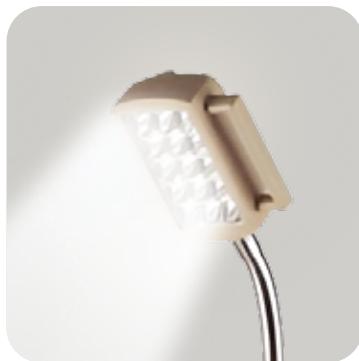

Thông số kỹ thuật

Điện thế 220V

Bóng đèn Diode 3,2V

Chóa đèn: phản quang hội tụ tích hợp 15 đơn vị không gây nhiệt. Hình chữ nhật 7 x 12cm. Có tay nắm

Độ sáng 18000 lux

Dây nguồn 3m Ø6

Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, 30cm + 30cm

Điều chỉnh chiều cao: từ 1m – 1,7m

ĐÈN GÙ TIỂU PHẪU ÁNH SÁNG LẠNH

Đèn tiểu phẫu ánh sáng lạnh giúp y bác sĩ thực hiện các tiểu phẫu và khám bệnh. Đèn với chiều cao 1,7m có thể điều chỉnh độ cao phù hợp với yêu cầu của công việc, nguồn sáng vàng, điểm tụ ánh sáng tốt, trung thực, giúp quan sát rõ.



Thông số kỹ thuật

Điện thế	220 VAC
Bóng đèn	Halogen 12V – 20W
Dây nguồn	3m
Chiều cao	Từ 1m – 1m7
Độ sáng	25,000 lux
Ánh sáng vàng	

Tính năng nổi bật

- Công nghệ biến tần, nhìn lâu không mỏi mắt, ánh sáng vàng
- Chóa đèn: Phản quang hội tụ, ánh sáng lạnh
- Chân đế bằng gang đúc hoặc chân đế tháo ráp dễ dàng mang đi

ĐÈN GÙ TIỂU PHẪU MEDILED

Đèn tiểu phẫu MEDILED dùng để khám bệnh và tiểu phẫu.



Đầu đèn siêu nhỏ nhưng có độ sáng lớn lên tới 20.000 lux. Thân đèn tiểu phẫu có thể điều chỉnh chiều cao từ 1m – 2m. Cổng ngỗng dài 50cm linh hoạt tối ưu, dễ dàng trong việc chiếu rọi các vùng cơ thể.

Thông số kỹ thuật

Khoảng rộng ánh sáng

Cách 1 m	ø12cm
Cách 0,6m	ø8cm
Cách 0,3 m	ø5cm

- Thân đèn điều chỉnh chiều cao từ 1m – 2m
- Cổng ngỗng dài 50cm linh hoạt tối ưu
- Bóng đèn: diot 3V
- Ánh sáng lạnh
- Đầu đèn siêu nhỏ gọn
- Được giải nhiệt phía sau trên toàn thân đèn
- Độ sáng 20.000 lux
- Nguồn điện: 220V
- Đế gang và đế ráp tiện dụng mang đi

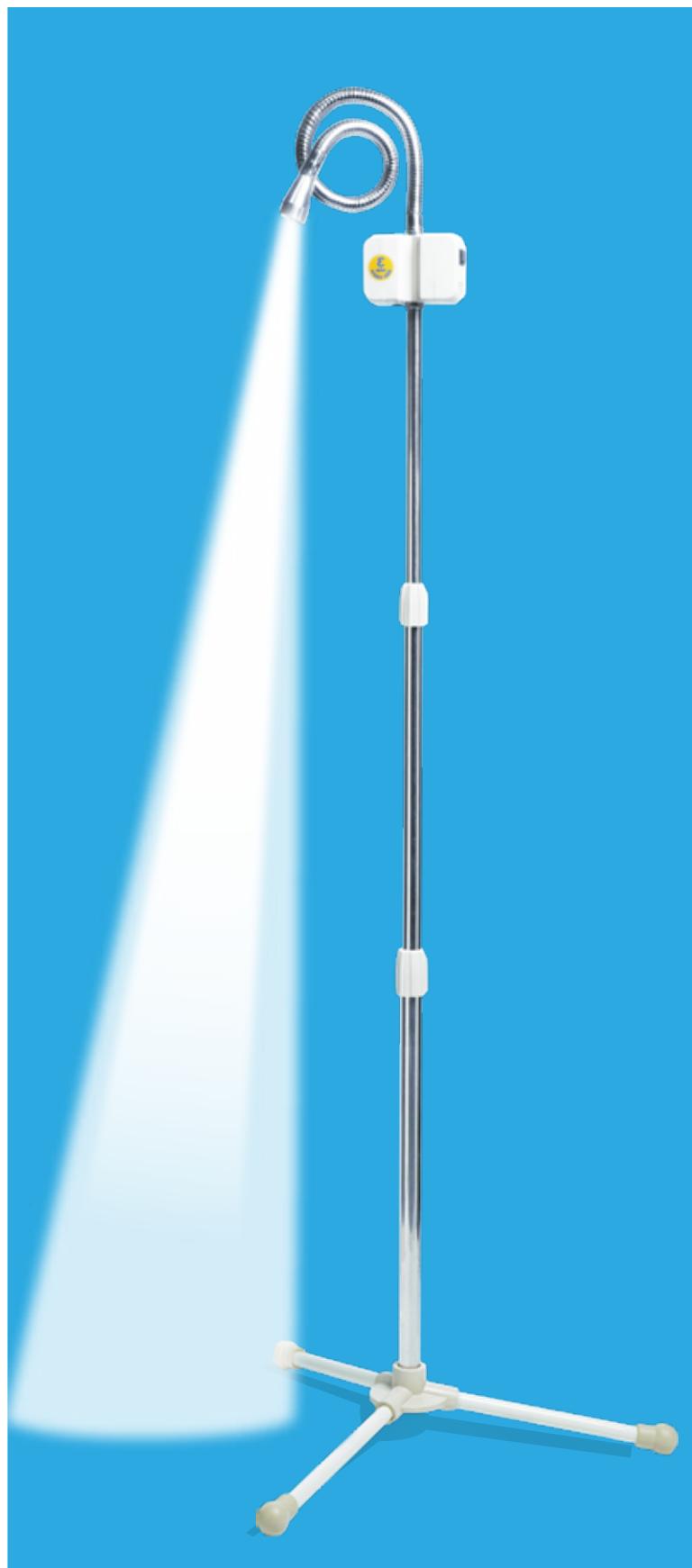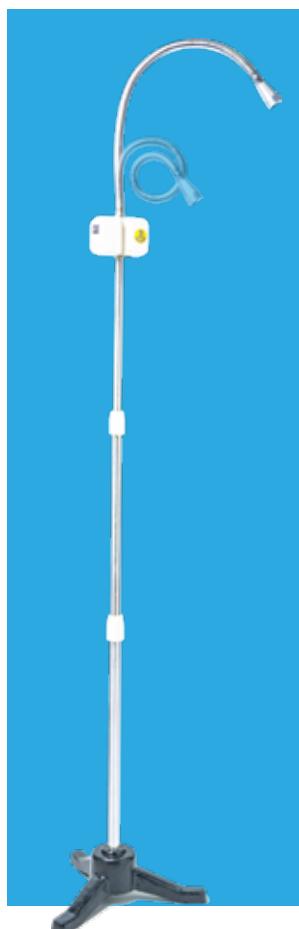

Hệ thống cửa hàng của TNE

Mời bạn vào Website
denykhoa.com hoặc tnelamp.com
để biết chi tiết cửa hàng

63 tỉnh thành Việt Nam
và các Quốc gia: Campuchia, Lào, Myanmar,...



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH NHÂN TNE

Nhà máy	289T9 Cây Da Xê, KP Tây B, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, T.Bình Dương.
Trụ Sở	36/12, Đường 13, KP.4, P. Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
Phòng trưng bày	268 Quốc Lộ 1K, KP. Tân Hoà, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, T.Bình Dương.
Website	www.denykhoa.com www.tnelamp.com www.thanhnhantne.com
Đường dây nóng	Miền Nam 098.919.3456 Miền Trung 098.939.6164 Miền Bắc 098.939.6162
Email:	sale@tnevn.com
Tel:	(028) 2215 8281 5443 1217 5443 1218

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ	108 ngõ 7, Nguyễn Ngọc Doãn, P. Quang Trung, Q. Đống Đa.
Điện thoại	(024) 3997.5998

DỊCH VỤ BẢO HÀNH

+30
năm hoạt động

Hơn 30 năm phục vụ khách hàng,
hàng triệu khách hàng hài lòng
với dịch vụ lâu dài, bảo hành của
Thành Nhân TNE.

Thành Nhân TNE lấy sự hài lòng của khách hàng là trọng
tâm trong việc bảo hành, do đó công ty không ngừng
nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì sản phẩm.

- 01 Thành Nhân TNE bảo hành miễn phí tất cả các hư hỏng kỹ thuật do công ty Thành Nhân TNE sản xuất trong 3 năm.
- 02 Bảo trì có thu phí trọn đời sản phẩm.
- 03 Bóng đèn là vật liệu tiêu hao, nếu được lắp rời thì không được bảo hành. Công ty Thành Nhân TNE sử dụng và khuyến khích khách hàng sử dụng bóng đèn loại tốt.



CÁC CỬA HÀNG, ĐẠI LÝ BÁN HÀNG RỘNG KHẮP,
PHÒNG TRUNG BÀY, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,
NHÀ MÁY LÀ NƠI NHẬN BẢO HÀNH
ĐỂ THUẬN TIỆN CHO QUÝ KHÁCH.

✉ CSKH@tnevn.com

MỤC LỤC VÀ CÁC GIẢI THƯỞNG

Trang bìa

Trang 2 **Về chúng tôi**

Trang 4 **Sứ mệnh tầm nhìn**

Trang 5

Trang 6,7 **Đèn hồng ngoại**

Trang 8,9 **Đèn đọc phim y khoa**

Trang 10,11 **Đèn cực tím**

Trang 12,13 **Đèn chiếu vàng da sơ sinh**

Trang 14,15 **Đèn thử thị lực**

Trang 16 **Đèn gù đa dụng**

Trang 17 **Đèn gù II**

Trang 18 **Đèn gù LED**

Trang 19 **Đèn gù tiêu phẫu ánh sáng lạnh**

Trang 20 **Đèn gù tiêu phẫu MEDILED**

Trang 21 **Hệ thống các cửa hàng của TNE**

Trang 22 **Dịch vụ bảo hành**

Trang 23 **Mục lục và các giải thưởng**



**HUY CHƯƠNG VÀNG
SẢN PHẨM
DỊCH VỤ NĂM 2023**



**TOP 100
THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU**



**DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU
VIỆT NAM 2015**



**TOP 50
NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG**



**THƯƠNG HIỆU VÀNG
UY TÍN**



VÀ NHIỀU GIẢI THƯỞNG TRONG, NGOÀI NƯỚC

ĐÈN Y KHOA MEDICAL LAMP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH NHÂN TNE

- **Nhà máy:** 289T9 Cây Da Xè, KP Tây B, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, T.Bình Dương.
- **Trụ Sở:** 36/12, Đường 13, KP.4, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
- **Phòng trưng bày:** 268 Quốc Lộ 1K, KP.Tân Hoà, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, T.Bình Dương.
- 📞 **Tel:** (028) 2215 8281 / 5443 1217 / 5443 1218
- 🏢 **VPĐD tại Hà Nội:** 108 ngõ 7, Nguyễn Ngọc Doãn, P. Quang Trung, Q. Đống Đa.
- 📞 **(024) 3997.5998**
- ✉ **Sale@tnevn.com / CSKH@tnevn.com**
- 🌐 **www.denykhoa.com - www.tnelamp.com**

TNE Co. LTD

- **Factory:** 289T9 Cay Da Xe St., Tay B Quarter, Dong Hoa Ward, Di An City, Binh Duong, VN.
- **Head Office:** 36/12, Road 13, Linh Xuan Ward, Thu Duc City, HCMC, VN.
- **Showroom:** 268, 1K Highway, Tan Hoa Quarter, Dong Hoa, Di An, Binh Duong, VN.
- 📞 **Tel:** (+84) (28) 2215 8281 / 5443 1217 / 5443 1218
- 🏢 **Office in Hanoi:** 108 Lane 7, Nguyen Ngoc Doan, Quang Trung Ward, Dong Da District.
- 📞 **(+84)(24) 3997.5998**
- ✉ **Sale@tnevn.com / CSKH@tnevn.com**
- 🌐 **www.denykhoa.com - www.tnelamp.com**